

新感覚のCAD/CAM機器を一斉公開

34μmの精度を持つ
プラグアンドプリント式
設置面積は
ノートPCより小さい
3Dプリンター

AccuFab-Aris
[アキュファブ-アリス]

NEW



メーカー独自の新技术LFD方式で
造形の美しさ、スピード
を提供する3Dプリンター

FORM

4B [フォーム4B]



NEW

1度に広い範囲を効率よく撮影
補綴専用型口腔内スキャナ

iTero lumina [アイテロ ルミナ]

NEW



Ci デジタル デンタルフェア in 大阪

SHINING 3D
DENTAL

先行お披露目

重量
わずか **106g**

**Aoralscan
Elf**

[エーオラルスキャン エルフ]

超軽量口腔内スキャナ
Type-C 1本接続、
3種チップ&
Intelli Biteで
咬合採得をスマートに

NEW

SHINING 3D

NEW

片手で持てる! わずか2kg
カプセル式の
チェアサイド3Dプリンター
コンパクトサイズで
パワフルな機能を搭載

Ceramix-Nano

[セラミックス-ナノ]

ご来場時のご注文で 院内で即日修復を実現

Ci カタログ掲載商品

全品 **5% OFF!**

※一部商品を除く

**ONE DAY
SMILE**

Ci ワンデースマイルトリートメント

AIによる自動CADデザイン&
熱処理不要のCAD/CAM材料による
チェアサイドソリューションを会場でご体感ください



DGSHAPE

SHINING 3D
DENTAL

MEDIT

Dentbird
Solutions

exocad

DOF

vatech mcis

formlabs dental

imes-icore
Dental & Medical Solutions

Robots and Design

豪華講師陣が集結 セミナー同時開催 デジタル歯科技工、AI活用の最前線を体験

10/31

土

14:30~16:00

「もうAIなしでは語れない」
— 歯科技工の革命 その次へ —

dental BioVISION (株) 代表取締役 辻 貴裕

17:00~18:30

Ciから2台目のIOS導入した結果
～インプラント用ステントと往診で満足いく事に～
ミライノデンタルクリニック 安岡 大介

参加費 無料

その他セミナー順次発表予定!

セミナー詳細・お申し込みについては
特設WEBサイトよりご確認ください。

11/1

日

10:00~11:30

IOSのその先へ

～3Dプリントで広がるデジタル歯科

たかはし歯科 高橋 良介

12:30~14:00

「私がSHINING 3Dを
選んだわけ」

hama lab 濱崎 順一

15:00~16:30

デントバードが導く保険技工の未来

～アップデートで遂げた
インレーデザインの進化と新ワークフロー～
(株)KDR labo 藤澤 和也

10/31

土

14:00~19:00

11/1

日

9:00~17:00

会場

梅田スカイビル タワーウエスト22F

大阪市北区大淀中1-1-30 梅田スカイビル タワーウエスト22階

JR
大阪駅から
徒歩 **7分**



参加申込・詳細はこちらから

混雑を避けるため
事前の申し込みにご協力ください。
ci-dentalevent.jp/



Ci デジタルデンタルフェアで検索!

イベントのお問い合わせはこちら

TEL.0761-50-2074

営業支援課 9:00~18:00 定休:土日祝

いまの診療スタイルに無理なく馴染む、 新しいデジタルのカタチ

操作性と追加機能※で
人気の口腔内スキャナ

SHINING 3D
DENTAL

大好評

Aoralscan Elite

1台に2つのスキャンモードを搭載!
さらに軽量※!大人気のワイヤレスも

※従来機(Aoralscan3)と比較

補綴専用型 次世代口腔内スキャナ登場

NEW

iTero lumina™

独自のテクノロジーにより
迅速かつ高精度なスキャンをサポート



SHINING 3D DENTAL カプセル式3Dプリンター

NEW

Ceramix-Nano

カプセルをセットし、スタートボタンでプリントが開始。
硬化装置一体型で製作までの工程をシンプルに。

各ショールームが体験型にリニューアルオープン

Dental CX Base

歯科診療と歯科技工の未来を体験し、そして今を創る

Tokyo

東京・御茶ノ水駅前
ショールーム

東京都千代田区神田駿河台2-8
瀬川ビル7F

JR御茶ノ水駅 徒歩1分

Osaka

新大阪駅東口
ショールーム

大阪府大阪市東淀川区東中島1-19-4
ルーシッドスクエア新大阪 1F

JR新大阪駅東口 徒歩1分

Fukuoka

福岡
ショールーム

福岡県福岡市博多区
博多駅東3-4-10 コマパビル1F

JR博多駅筑紫口 徒歩9分

顧客体験(CX)を重視し、見て・触れて・体験していただける
大型機器・デジタル機器・CAD/CAM機器に特化したショールームです。

※掲載写真は東京ショールームで撮影されたもので、他ショールームのイメージとは異なります。

詳細はこちら



全国
対応

Webデモやオンライン相談も可能!

全国の営業所からデモに伺います!

・北海道営業所・仙台営業所・東京営業所・北陸営業所・長野営業所
・名古屋営業所・大阪営業所・広島営業所・福岡営業所・鹿児島出張所

チラシ掲載の製品のお問い合わせはこちらまで

0761-50-2074

【Ciメディカル 営業支援課】
9:00~18:00 定休:土日祝

お電話にてチラシコード **R2609A** をお伝えください

デジタルスプリント 導入パッケージ

口腔内スキャナ

3Dプリンター

本DM限定

特価

価格はお問合せください

Aoralscan Elite

または Aoralscan 3

190万円～(税込2,090,000～)



AccuFab-Aris

40万円 (税込440,000)

口腔内スキャナと3Dプリンター同時導入で**本DM限定の特価**をご用意

口腔内スキャナ

SHINING 3D
DENTAL

Aoralscan Elite

エーオラル
スキャン
エリート

ワイヤレス
なのに
重さわずか
194g

超軽量
124g

最大100回
オートクレープ
可能

ユーザー
の声

軽量で取り回しが良く、長時間の診療
でも快適に使用しています。

IPG技術を採用し1台に
2つのスキャンモードを搭載。
ロングスパンブリッジから無歯顎の
正確なスキャンングを実現。

- 超高精細
- クレードル簡単切り替え
- ロングスパンブリッジ
専用チップ
- 高速で安定した
ワイヤレス
- 長持ちバッテリー
- 業界初!インプラント
ロングブリッジ対応

オプション品



単位:mm



専用スキャンボディ
オプション品

IPG技術と専用スキャンボディでオールオン
フォーケースに対応。業界初となる2-in-1の
口腔内スキャナ。各インプラントメカに対応。

Aoralscan 3

エーオラル
スキャン
スリー

圧倒的なスキャンスピードと使いやすさを
ご体験ください!

- 高速で安定
- 使いやすい
デザイン
- ワイヤレス
- オートクレープ
100回可能
- 次世代
ソフトウェア
- 長持ち
バッテリー



3Dプリンター

SHINING 3D
DENTAL

AccuFab-Aris

アキュファブ
アリス


NEW

コンパクトなデザインで、幅広い臨床に対応。
院内ワークフローを支える一台。



本体重量
8.5kg

超小型
B4
サイズ

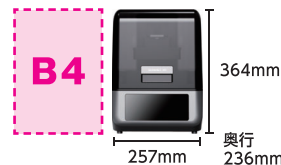

- 約8.5kgの小型設計で、省スペース設置に対応。
- プラットフォームの30℃温調で、
反りや剥離を防ぎ造形品質を安定化。
- 4K・34μmの高精細造形。
緻密な修復物製作をサポート。
- タンク残留物の、自動検知機能で
誤操作を防ぎ、故障リスクを低減。
- レベリングと起動時のZ軸キャリブレーションの自動化で、
初期設定の負担を軽減。
- 簡便な操作設計により、デジタルワークフローを効率化。

無料で使えるアプリケーション

Cre Splint

AI補助による簡単操作

SHINING3D
x
CreSplint

STEP1. Scan



STEP2. AI Design



STEP3. 3D Print



重合器ポストキュアユニット
FabCure 2
ファブキュア2

各素材に最適な
ポストキュア処理を快適に実現

15万円 (税込165,000)

販売名: Fab キュア2 届出番号: 17B2X10001001914

作業模型など繊細な再現が必要な
模型製作用



Fab デンタルモデル
レジン [DM12]

イエロー 18,000円
1本 (1kg) (税込19,800円)

販売名: Fab デンタルモデルレジン
届出番号: 17B2X10001001906

インプラント模型、作業模型、
クラウンブリッジ用



Fab デンタルモデル
レジン [DM03]

グレー 18,000円
1本 (1kg) (税込19,800円)

販売名: Fab デンタルモデルレジン(グレー)
届出番号: 17B2X10001001905

熱成形マウスガード、アライナー、
スプリント製作模型用の耐熱性レジン



Fab オルソモデル
レジン [OD02]

1本 (1kg) 20,000円
(税込22,000円)

販売名: Fab オルソモデルレジン
届出番号: 17B2X10001001900

サージカルガイド製作用、
インダイレクトボンディング用



Fab サージカルガイド
レジン [SG01]

1本 (1kg) 25,000円
(税込27,500円)

販売名: Fab サージカルガイドレジン
届出番号: 17B2X10001001902

透明なスプリント
ナイトガード用 ハード



Fab スプリント
ハードレジン [SH01]

1本 (1kg) 50,000円
(税込55,000円)

販売名: Fab スプリントハードレジン
届出番号: 17B2X10001001950

透明なスプリント、
ナイトガード用 ソフト



Fab スプリント
ソフトレジン [SS01]

1本 (1kg) 38,000円
(税込41,800円)

販売名: Fab スプリントソフトレジン
届出番号: 17B2X10001001907

作業模型用、造形後水で洗えるレジン



Fab ウォッシュابل
レジン [W20]

1本 (1kg) 18,000円
(税込19,800円)

販売名: Fab ウォッシュابلレジン
届出番号: 17B2X10001001949

ワックスパターン製作用レジン
(クラウン、ブリッジ、パーシャル)



Fab キャスタブル
ワックスレジン [DC12]

1本 (1kg) 26,000円
(税込28,600円)

販売名: Fab キャスタブルワックスレジン
届出番号: 17B2X10001001903

カスタムトレー、
ベースプレート製作用



Fab トレーレジン
[TR01]

1本 (1kg) 22,000円
(税込24,200円)

販売名: Fab トレーレジン
届出番号: 17B2X10001001901

カプセルをセット、スタートボタンを押してプリント開始。
硬化装置を一体化した設計により製作工程をシンプルに。

Ceramix-Nano

歯科用 カプセル式3Dプリンター【セラミックス-ナノ】

コンパクトボディ に充実の機能

重量わずか約2kgの
コンパクトボディに
必要な機能を凝縮

スピードを支える 独自技術 (APS)

独自技術APS採用で、
高粘度のセラミック
フィラー含有材料に対応


硬化装置 一体型

80℃対応
硬化ユニット搭載の
プリント&キュア一体型



1カプセルで、幅広い 補綴物製作に対応

1カプセルで、ベニア、インレー、
アンレーの他、クラウンなら最大3歯分、
ブリッジなら最大38mmまでの造形が可能

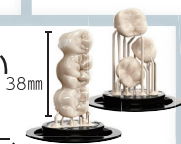

オプション

審美硬化モジュール

オプションの審美重合モジュールは、
酸素の影響を抑えた重合により、審美性に
配慮した最終補綴装置の製作を可能にします



セラミックレジン【ルミセラ】

LumiCera

6g×3個入り **13,500円**
(税込14,850)

セラミックレジンをあらかじめ充填した専用カプセル。
計量の手間なく、セット後すぐにプリントを開始できます。

販売名: Shining3D Dental クラウン&ブリッジ 200 届出番号: 308AKBZ100028000



【本体サイズ】 W87×D131×H276mm



本体価格 **110万円** (税込1,210,000)

販売名: Ceramix-Nano 3Dプリンター 届出番号: 17B2X10001002150

NEW

本体重量
8.5kg

超小型
**B4
サイズ**



補綴物 サージカルガイド 模型

本体価格 **40万円** (税込440,000)

販売名: AccuFab-Aris 3Dプリンター 届出番号: 17B2X10001002149

コンパクトなデザインで、幅広い臨床に対応。
院内ワークフローを支える一台。

AccuFab-Aris

歯科用 3Dプリンター【アキュファブ-アリス】

コンパクトなデザイン

わずか約8.5kgのコンパクトな設計
で、設置場所を選ばず導入しやすい。
本体サイズ: W257×D236×H364

恒温ビルドプラットフォーム

造形プラットフォームを約30℃に自動制御し、
レジンの反りを抑制。造形物の剥離リスクを
低減し、安定した造形品質をサポートします。



高精度プリント

4K高解像度LCDと34μmの
高精度造形により、精密な歯
科用プリントを実現。

スマートフェールセーフセンサー

残留物とレジタンク (NFC) を自動検知して誤操
作を防止。本体の損傷リスクを抑え、安心してプ
リントできます。




直感的に使えるソフトウェア

操作やナビゲーションを簡単に行える設計
を採用。複雑な作業の効率化をサポートし、
デジタルワークフローの円滑な運用を支援

自動レベリングが簡単に

ワンクリック自動レベリングと起動時
の自動Z軸キャリブレーションにより、
設定を自動処理。

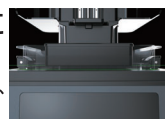

SHINING Flow

Shining 3D Dental Cloud

スキャンからプリントまで院内で一貫したデジタルワークフローを実現。

チェアサイドの効率化により、スピーディーな製作・提供を支
援。患者様の負担軽減にも配慮した診療体制に貢献します。

スキャン

AI
デザイン

プリント





補綴専用型 口腔内スキャナ

アイテロ ルミナ Ciメディカル 正規代理店

iTero lumina™

独自のMulti-Direct Captureテクノロジーにより
迅速かつ高精度なスキャンをサポート

Multi-Direct Capture (MDC) とは

複数の方向から同時にデータを取得する独自のスキャン技術です。
従来よりも一度に広い範囲を効率よく撮影でき、スキャン回数を減らしながら、高精度な3Dデータを短時間で取得可能です。



本体価格

298万円
(税込3,278,000)

販売名: iTero Lumina Core口腔内スキャナー
一般的名称: デジタル印象採得装置
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
歯科診断用口腔内カメラ
承認番号: 30500BZX00270000

1度で撮影する範囲が広く、フルアーチインプラント補綴、
歯牙欠損部、無歯顎症例まで高い再現性が期待できます。



マルチアングル
カメラ

6個搭載

最大撮影深度

25mm

スキャン範囲

3倍※

ワンドのサイズ

50%小型化※

スキャン速度

2倍※

ワンドの重さ

45%軽量化※

※メーカー従来機比

チェアサイドCADソフト付帯

iTero™ Design Suite

exocadをベースにしたシンプルで直感操作のCAD設計ソフトがサービスプランに含まれており、追加費用なしで利用可能※

※別途専用PCが必要です。



exocad

140万円相当の
モジュールが
付帯

9つのモジュールで構成

クラウン／コーピング

- ・フルクラウン
- ・プロビジョナルクラウン
- ・オーバーレイ

ポンティック

- ・アナトミカルポンティック
- ・プロビジョナルポンティック
- ・モックアップ

インレー／ベニア

- ・インレー／アンレー
- ・ベニア

器具とリムーバブル

- ・バイトスプリント

デジタルチェアサイド・ワークフロー

スキャンからクラウン製作までを
シームレスに

1 SCAN

口腔内をスキャン



iTero lumina™

2 DESIGN

スキャンデータを元に
クラウン設計



iTero™ Design Suite

3 PRODUCE

設計データから
クラウン造形



Ceramix-Nano
AccuFab-Aris



スピーディーな
ワークフローで
製作期間の短縮に



高い精度・再現性で
品質が安定



患者さんに合わせた
理想的な補綴物ができ
満足度向上に



デジタルによる
シームレスな連携で
生産性がアップ



顎顔面・顎関節CT／デンタルCT／エンドCT／3Dフェイススキャン／パノラマ／セファロ

6つの機能を1台に集約

10年
フル保証
付き

ボクセルサイズ
50μm
超高精細

Green X 21TM

グリーン エックス 21

セファロ無し
1,360万円
(税込 14,960,000)

セファロ付
1,500万円
(税込 16,500,000)

販売名: X線CT診断装置GreenX
デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置
特定保守管理医療機器、設置管理医療機器
認証番号:303AFBZX00065000



バーチャル患者の生成を実現

3Dフェイススキャン機能 vatech社システム初搭載

対象FOVサイズ(cm) 12×9 18×15 21×19

セファロの短時間撮影が可能 (オプション)

ワンショットセファロに対応

モーションアーチファクトを大幅に低減し、

診断ワークフローを加速。精度の高いセファロ分析を実現。


撮影時間

0.9秒

正確なポジショニングを支援

『パドルランプ』搭載

直感的なガイダンスにより、患者の位置を一目で確認でき、操作性の向上とともに撮影精度のさらなる向上を実現します。

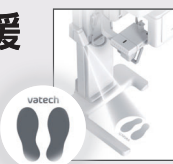

1回の撮影で複数の診断画像を取得

FOV 21×19cmの場合

CT画像 ×1

+

パノラマ画像 ×1

+

簡易セファロ画像 ×1

FOV 12×9cmの場合

CT画像 ×1


+

パノラマ画像 ×1

+

エンド画像 ×3

包括的画像診断 & データ管理ソフトウェア搭載

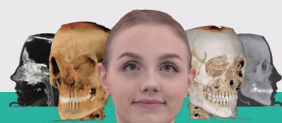

Clever One クレバー ワン

- 1つの画面に2Dと3Dの画像を表示でき、より直感的な診断を支援
- インプラント計画に必要なシミュレーションを包括的にサポート
- 根管形状を三次元的に把握でき、根管の角度、距離、半径の計測が可能

撮影FOV比較表

幅広いニーズに合わせた機種をご用意しております

CT機種 \ 撮影FOV	Φ4×4 (50μm)	Φ5×5 (80μm)	Φ8×5 (120μm)	Φ8×8 (120μm)	Φ9×8 (200μm)	Φ12×5 (200μm)	Φ12×9 (200μm)	Φ12×14 (300μm)	Φ18×10 (200μm)	Φ18×15 (200μm)	Φ18×24 (400μm)	Φ21×19 (400μm)
GreenX21	18.1	14.5	7.1	7.1	—	7.1	7.1※2	—	—	18.3	—	18.3
GreenXPlus	18.0	2.9	—	2.9	—	—	9.0(16×11)	—	9.0	9.0	9.0×2	—
GreenX12	13.0	—	10.0	10.0	—	—	15.5※1	15.5※1	—	—	—	—
Green18	—	4.9	—	4.9	—	—	9.0(13×10)	—	9.0	—	—	—
Smart Plus	—	18.0	—	18.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—
Ace9	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—

※1 Auto PANO設定時は19.9秒 ※2 スマートフォーカス/18.1秒 単位:秒

院内のどこにいても、画像へアクセス

診療用ソフトウェア[EzDent-i] [Ez3D-i]にWeb経由でアクセス。モバイル端末から、デンタル、パノラマ、CT、顔貌写真の画像診断やインプラントシミュレーションなど、さまざまな機能を操作可能にするアプリ。スマートな診療スタイルをサポートします。

EzDent Web
vatech

イージーデント ウェブ



院内どこでも

場所を選ばず、レントゲンの確認や診断が可能。

PCは不要

専用モニター等を設置せず、モバイル端末で完結。

台数は無制限

複数スタッフで同時に活用が可能。

スムーズな説明

手元の画面を患者に見せながら、より分かりやすく説明。

販売名:イージーデント ウェブ
認証番号:308AFBZX00055000